


VeinViewer tehnoloogia kasutamine vähendab kõikide osapoolte ärevust ja patsiendi valu

Christie pakub kõige uuenduslikumat perifeerset veenide kuvamise seadet. Kasutades lähisinfrapuna-kiirgust (NIR; *near-infrared*) koos teiste tehnoloogiliste uuendustega, saab VeinViewer seadme abil kuvada pindmisi veresooni reaalajas, veresoonte HD kujutis kuvatakse otse patsiendi nahale. VeinViewer on ainus toode, mis võimaldab High Definition - Df2 (*digital full field*) kuvamist. VeinViewer vähendab korduvaid nõelatorkeid veeni otsimisel ja vajadust perifeerselt sisestatavate tsentraalkateetrite (PICC) järele, suurendades seega patsiendi mugavust

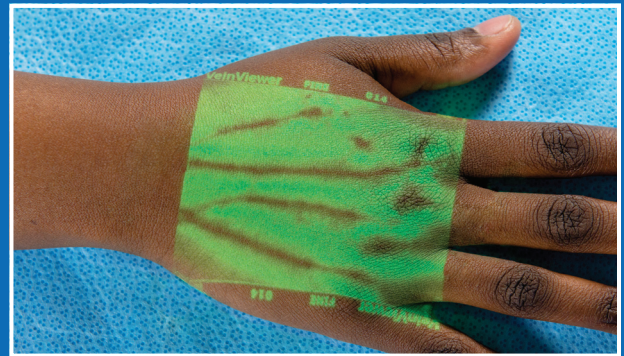

VeinViewer Vision2

Kuuenda põlvkonna mudel VeinViewer Vision2 on kuvamiseks kasutatav vabakäeseade, mille abil saab kiiresti ja lihtsalt luua kuvasid kogu keha ulatuses. Vision2 tähendab võimalust teha kasutajapoolseid seadistusi, sellel on mugav alus, mis ei jää kuvamisel ette, ning lai liigutamisamplituud.

Riistvara

- Vision2 peasüsteem on kergesti liigutatav vaid ühe käega, vabakäeseadet saab kiiresti viia vaatlemisvalmidusse.
- Võrgutoide või akutoide (Fast Swap Battery). Akutoide on tagatud 2 tunniks katkematuks kasutamiseks, akutoitel seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Samad akud sobivad nii Vision2 kui Flex seadmetele.
- Vision2 kuvamispea liigend võimaldab seda keerata kuni 360°, seega saab fookuseerida mistahes asendis patsiendi.
- Tänu Vision2 liigendi MaxReach funktsioonile saab patsiendist "peast-varvasteni" pildi. 83% pikem kui eelmine mudel.
- Madal alustugi tagab lisaks protseduuri efektiivsusele ka hea manöövervusvõime.
- Korv IV tarvikute jaoks.

Tarkvara - kuvamisvõimalused

•ASSESS™ Plus Imaging Suite režiimid

S Universal	S Inverse	S TriColor	S Image Capture
S Fine Detail	S Resize	S MaxBright	

S - standard O - eraldi tellitav

Spetsifikatsioon

Kaal 24,5 kg
Kõrgus 173 cm
Toide 100–240 VAC
Aluse mõõtmed diagonaal 53cm

MaxReach (liigendi siruulatus 135cm
Eredus 10 lumenit (MaxBright)
kuni ~6 lumens (ilma MaxBright
funktsioonita)



VeinViewer Flex

VeinViewer Flex on meie poolt pakutavatest kaasaskantavatest mudelitest parim. Mõeldud alternatiivkasutuseks, nt erakorralises meditsiiniabis, perearstide kabinetides, onkoloogia erakliinikutes.

Riistvara

- Seade on kompaktne, mõeldud nii käest kasutamiseks kui käed-vabad süsteemiga (S-Mount)
- VeinViewer'i kvaliteedile ja vastupidavusele lisandub ülihea mobiilsus
- Akutoide või võrgutoide
- "Fast-swap" akudel kuni 2 tundi katkematut tööaega (lisaaku korral 4 tundi)

Tarkvara - kuvamisvõimalused

- ASSESS Imaging Suite režiimid

- Universal
- Inverse
- MaxBright
- Fine Detail
- Resize
- Image Capture

Lisafunktsioonide (O) jaoks vajalik litsentsi uuendamine

Spetsifikatsioon

Standarderedus 6 luumenit	EMC klass B
Kaal 0,73kg	Vastupidav - läbis kukkumistestid
Toide 100-240 VAC	(IEC/UL 60601-1)

Pildil on nii tavavarustus kui eraldi tellitav lisavarustus



VeinViewer Flex lisavarustus

- S 2 paigaldusalust (S-Mount)
 - suur klamber
 - C-klamber
- S 2 "Fast Swap" akut
- S Akulaadija
- S Vahelduvvoolu adapter
- S Lisaadapterid
- S Nailonist kott
- S USB kaabel
- S DVD kasutusjuhendiga
- O Suur transpordikott
- O Autolaadija (puudub pildilt)

S - standard O - eraldi tellitav

Samuti saadaval Vision ja Vision^{XTND}. Täpsem info - vt christiemed.com

Eksklusiivne kuvamislahendus

ASSESSTM plus

- Universal - kasulik kõigile patsientidele
- Fine Detail* - vajalik väikeste veenide kuvamiseks pediatría- või skleroteraapia patsientide puhul
- Inverse* - meedik saab teha patsiendist lähuvaid kuvamisestistusi
- Image Capture* - vastab HIPAA nõuetele ; EMR dokumentatsiooni jaoks saab teha veresoontest kuni 200 staatilist .PNG kuva
- MaxBright* - lisab eredust 40%, kasutatakse tavalisest erinevate valgustustingimuste puhul. Ainult Flex seadme jaoks EMS konfiguratsioonis.
- TriColor - kasutaja saab seadistada kuva värvust roheline, kollane, valge), olenevalt patsiendi nahatoonist või isiklikest eelistustest. Ainult Vision2 seadmes.
- Resize* - cvalitav üks kolmest akna suurusest, vajalik nt pediatríaipatsientide puhul

*Vajalik litsentsi uuendamine ainult VeinViewer Flex jaoks.

Christie Medical Holdings, Inc.
Memphis, TN

info@veinviewer.com www.christiemed.com

1-877-SEE-VEIN (1-877-733-8346) TOLL FREE

CHRISTIE+