


Uriinialüsaator HC-300

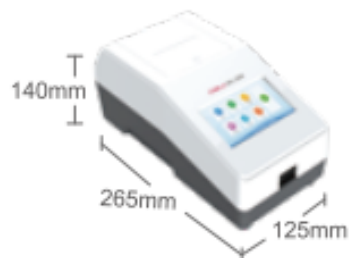

Uriinialüsaator tootjalt DIRUI

- Palju erinevaid rakendusvaldkondi
- Väikesemõõduline, kompaktne, kaasaskantav
- Sobilik perearstidele
- Kuni 14 mõõdetavat parameetrit, sh. mikroalbumiin ja kreatiniin
- Kasutajal on võimalik valida erinevaid töökeeli
- Kasutajasõbralik värviline puutekraan

Spetsifikatsioon:

Ekraan	värviline 4,3 " puutekraan
Jõudlus	60 testi tunnis või 120 testi tunnis
Parameetrid	UBG, BIL, KET, CRE, BLD, PRO, MALB, NIT, LEU, GLU, SG, pH, VC, Ca
Töömeetod	fotoelektriline kolorimeetria
Lainepikkused	525nm, 572nm, 610nm, 660nm
Mälu	kuni 10 000 andmeüksust, SD kaart (andmete eksportimiseks)
Keeled	inglise, hispaania, portugali, vene, poola, itaalia, türgi, saksa, prantsuse
Mõõtmed	265 x 140 x 125mm
Toide	12V, 110/220V
Ümbritseva töökeskkonna temperatuur	15 °C – 35 °C
Suhteline niiskus	75% või vähem
Õhurõhk	76kPa – 106kPa

